

Pipet-Lite磁辅移液器


磁力助您精确移液！ 远离手部疲劳！

Pipet-Lite
磁辅
移液器



专利设计的磁辅装置

专利设计的磁辅装置(Magnetic Assist)使移液器活塞弹簧变得更轻更灵活，能很清晰地感觉到活塞的零点定位，减少了吸液和排液时弹簧之间的巨大力差，手感极其舒适，减少了手部重复性劳损(RSI)的发生，并能确保移液更高的精确性与准确性。

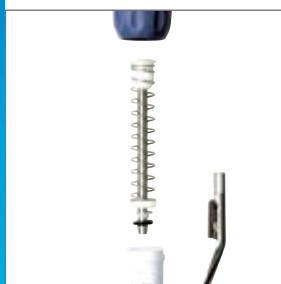

轻质弹簧设计

研究表明，手动空气置换移液器移液用力有一半来自活塞推进力，另一半来自退吸头用力。磁辅装置，轻质弹簧，较小的密封区，极大减少了活塞推进力，从而减少您移液操作用力。



一致而快速地吸液

磁辅技术让您可以快速准确地找到零点位置，有助于提高移液的准确性和可重复性，确保每次吸液体积的真实准确。



移液量程可锁定

移液器锁定装置可将量程锁定，防止体积被意外更改，吸头推出器内有硅树脂减震器，可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力。



一场人体工程学的技术革命！

RAININ发明了世界上第一支手动磁力移液器，至此移液器进入全新的时代。

- 采用了高度光滑不锈钢活塞技术
- 超轻质的活塞弹簧，人性化的指钩设计可大大减轻移液时所需的手腕力，避免手部重复性劳损(RSI)的发生，活塞推进力比传统移液器省力57%。
- 卸下的吸头推出器和移液器套柄均可高温高压消毒

磁辅移液器Rainin Pipet-Lite

订货信息

规格	量程范围	步进量(μl)
磁辅手动单道可调式移液器		
SL-2	0.1-2μl	0.002
SL-10	0.5-10μl	0.02
SL-20	2-20μl	0.02
SL-100	10-100μl	0.2
SL-200	20-200μl	0.2
SL-300	20-300μl	0.5
SL-1000	100-1000μl	2
SL-2000	200-2000μl	2
SL-5000	500-5000μl	5
SL-10ml	1-10ml	20



移液器挂钩(HU-M3、HU-S3)

可提供两种系列：磁铁型挂钩(HU-M3)用来固定在铁质表面上，如通风橱；粘贴型挂钩(HU-S3)背面的3个强力胶粘贴用来固定而非铁质表面上。每套有3个挂钩，适用于所有Pipet-Lite、Pipet-Lite XLS系列移液器。



Rainin旋转型支架(CR-7)

适用于Pipet-Lite, Pipet-Lite XLS, EDP3, 可同时放7支移液器，座架坚实稳固，旋转取用，十分方便。



Rainin洁净移液器吸头

Rainin设有100,000级超洁净移液器吸头生产车间，从源头上保证了吸头的洁净无污染，可提供：经济型袋装、盒装、经济型再补充装吸头等系列，独有的RAININ FinePoint薄壁吸头设计，确保了移液器操作中移液量的高准确性和高精确性。



梅特勒-托利多

实验室 / 过程检测 / 产品检测设备

地址：上海市桂平路589号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: ad@mt.com

工业 / 商用衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编：213125
电话：0519-86642040
传真：0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

www.mt.com

访问网站，获得更多信息

