

Pipet-One 手动移液器

远离手部疲劳



- 人体工程学设计, 远离手部疲劳
- 性能卓越, 持久耐用
- 全进口配件, 国内组装

磨砂表面, 持久耐用

Pipet-One 坚固的设计能确保使用多年后仍保持高精度。表面磨砂设计, 让您第一次使用就有强烈的感觉: 这是移液器中的精品!

性能卓越

Pipet-One 带给您优秀的移液性能: 高准确性和重复性, 因此您可以对移液结果完全放心。

不锈钢活塞

高度光滑不锈钢活塞, 无需润滑油日常保养 (PO-5000, PO-10ML 除外)。


时尚、远离手部疲劳的人体工程学设计

Pipet-One 可以降低手部重复性劳损的风险: 采用更为轻巧的吸液弹簧和排液弹簧以及低阻力密封装置, 从而降低拇指用力, 这也意味着减少手部疲劳、酸痛和损伤的风险。

人性化的指钩设计, 让您在移液过程中无需时刻紧握移液器, 从而让您的手部可以更加轻松、减少手部疲劳, 以及提供移液操作的稳定性。

吸头推出器内置硅树脂减震器, 极大的减少退吸头用力。

移液器活塞推进力比较

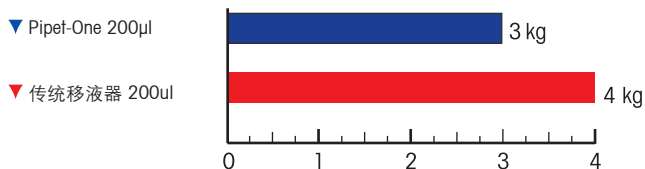

Pipet-One 比传统移液器可节省25%活塞推进力

Pipet-One 手动移液器

创新的人体工程学设计



双模式的量程调节

您可以通过移液器顶端的白色旋钮或者移液器握柄上部的黑色旋钮进行量程调节。

分类色标

按钮处不同颜色的色标使移液器分类更加轻松。

符合人体工程学原理的指钩设计

减少手握持力，降低手部疲劳，在移液过程中为您的手指提供一个“休憩的港湾”。



吸头推出器内置硅树脂减震器

可缓冲退吸头时产生的撞击力和压力，为您的拇指提供更多的保护。



快速释放型吸头推出器

独特的带弹簧锁式吸头推出器设计：只需轻按弹出钮即可将吸头推出器卸下，便于移液器清洁保养和维护（套柄及吸头推出器可高温高压灭菌）；同时，也保证在退吸头时推出器不会脱落。

订货信息

Pipet-One		
型号	订货号	量程
PO-2	12103709-CN	0.1 μ l-2 μ l
PO-10	12103710-CN	0.5 μ l-10 μ l
PO-20	12103711-CN	2 μ l-20 μ l
PO-100	12103712-CN	10 μ l-100 μ l
PO-200	12103713-CN	20 μ l-200 μ l
PO-1000	12103714-CN	100 μ l-1000 μ l
PO-5000	12103715-CN	500 μ l-5000 μ l
PO-10ML	12103716-CN	1 ml-10 ml
PO-START	12103759-CN	移液器套装

PO-START 移液器套装：内含PO-20, PO-200, PO-1000 以及相应吸头配件
Pipet-One 采用传统型吸头

www.mt.com

访问网站，获得更多信息



梅特勒-托利多
实验室 / 过程检测 / 产品检测设备
地址：上海市桂平路 589 号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail: ad@mt.com

工业 / 商用衡器及系统
地址：江苏省常州市新北区太湖西路 111 号
邮编：213125
电话：0519-86642040
传真：0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
12360010 Printed in P. R. China 2010/12

